

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce produit innovant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bracelet antironflement
- 3 paires d'électrodes autocollantes
- 2 paquets de chiffons nettoyants
- Mini-tournevis
- Bracelet avec fermoir en plastique
- Mode d'emploi

## Accessoires requis non fournis :

1 pile de type AAA (Micro)

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez jamais cet appareil en même temps qu'un autre appareil de massage électrique.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles et batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Notes sur les massages électriques

- Les catégories de personnes suivantes de ne doivent PAS utiliser le bracelet antironflement :
  - les personnes souffrant des problèmes cardio-vasculaires (maladie du cœur, tension artérielle anormale, port d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur)
  - les femmes enceintes ou ayant accouché depuis peu de temps
  - les personnes atteintes de tumeurs ou de tuberculose
- N'utilisez pas le bracelet antironflement si vous avez de la fièvre ou si vous souffrez d'une infection.
- Veillez à ce que la peau soit bien sèche à l'endroit où vous placez les électrodes. Ne placez pas les électrodes sur une zone où la peau est blessée ou irritée, ni sur des rougeurs.

- Gardez le bracelet antironflement toujours bien propre.
- Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel durant l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'utilisez pas le bracelet antironflement à proximité de la bouche ou des parties génitales.


## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-5271, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
03.06.2014



## Votre nouveau bracelet antironflement

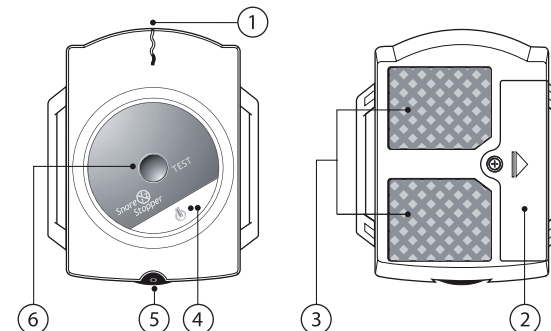

1. Microphone
2. Compartiment à pile
3. Zone de contact des électrodes
4. Témoin de fonctionnement
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Touche TEST

## Insérer la pile


Ouvrez le compartiment à pile à l'aide du mini-tournevis. Insérez une pile du type AAA dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Refermez le compartiment à pile et revissez-le bien.

## Coller les patchs des électrodes

Ouvrez un des deux paquets et sortez les patchs autocollants. Retirez les deux films imprimés. Placez le patch sur la surface noire en plastique située à l'arrière de l'appareil et collez le fermement. Retirez ensuite le film protecteur transparent. Les patchs adhésifs perdent leur pouvoir adhérent s'ils ne sont pas portés pendant une durée prolongée. De ce fait, la conductivité est influencée et il est possible que les impulsions ne soient plus ressenties de manière aussi intense. Si tel est le cas, nettoyez les patchs avec précaution en y versant une goutte d'eau. Passez ensuite le doigt une à deux fois sur la surface des patchs des électrodes.

Si malgré cela les patchs des électrodes n'adhèrent pas sur votre peau, il est recommandé de les remplacer par une nouvelle paire. Dans le cas d'une utilisation normale, vous pouvez utiliser les patchs pendant 30 nuits environ.


Utilisez les chiffons nettoyants pour nettoyer les zones de contact des électrodes en éliminant les restes de substance adhésive des patchs.

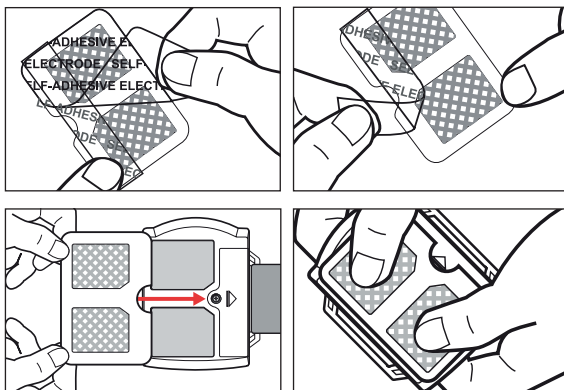

**NOTE :**  
Des patchs de rechange sont disponibles sur le site [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) sous la référence NC5422.

## Fixer le bracelet

Accrochez le bracelet sur le côté de l'appareil. Passez ensuite le bracelet de l'autre côté de l'appareil, à travers la boucle, et ajustez-le à votre taille. Enlevez la boucle amovible et fixez l'appareil sur le côté intérieur de votre avant-bras, à environ trois centimètres de votre poignet. Si nécessaire, modifiez la longueur du bracelet.

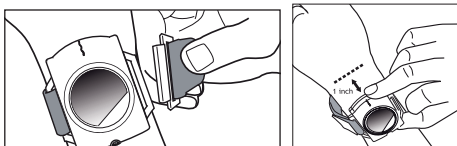



**NOTE :**  
Ne serrez pas trop le bracelet afin d'éviter de bloquer la circulation du sang.

## Utilisation

Mettez le bracelet antiroufflement. Allumez-le avec l'interrupteur marche/arrêt et choisissez pour commencer le niveau d'intensité 1. Quand le témoin de fonctionnement clignote une fois, l'appareil est allumé.

Lorsque le bracelet antiroufflement avec bien en contact avec la peau, le témoin de fonctionnement brille en vert. Resserrez le bracelet si cela n'est pas le cas.

Testez alors l'intensité en appuyant sur la touche TEST. Si vous ne sentez rien, augmentez l'intensité progressivement et testez chaque niveau.

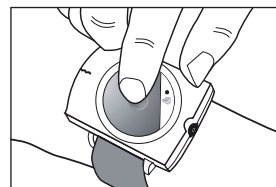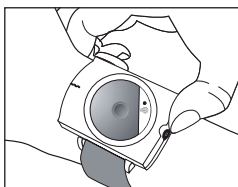

**NOTE :**  
Recollez le film protecteur sur les patchs si vous n'utilisez pas l'appareil pendant la journée.

## Fonctionnement

Un biocapteur filtre les bruits de fond et ne réagit qu'au son des roufflements. Si vous roufflez trois fois de suite, une impulsion est alors transmise à votre poignet. Cette impulsion est si faible qu'elle ne vous réveille pas, si vous avez réglé le bon niveau d'intensité. Votre subconscient peut toutefois réagir à l'impulsion et ainsi vous amener à modifier votre position. Étant donné le fait que le roufflement est souvent provoqué par un blocage des voies respiratoires, cela doit pouvoir mettre fin à vos roufflements.



**NOTE :**  
Le bracelet réagit aux roufflements au-delà de 65 décibels, à condition que les bruits de la pièce ne dépassent pas les 55 décibels. Le bracelet antiroufflement réagit au troisième fort roufflement.



**ATTENTION :**  
L'apnée du sommeil peut être une des conséquences du roufflement important. La respiration est alors temporairement suspendue. Si vous remarquez un ou plusieurs des symptômes suivants, consultez sans attendre un médecin ou un laboratoire du sommeil :

- Fatigue constante
- Pausés respiratoires pendant le sommeil
- Réduction de la résistance physique ou mentale
- Surpoids
- Hypertension artérielle
- Antécédents familiaux (infarctus ou accident vasculaire cérébral)